

مستحضرات التجميل **Es**
الطبية تقنيات إزالة الشعر بالليزر

epikoz

دائماً أبعد معنا

عناصر تصميم عالية الجودة

CE

COOL LITE PLUS



ما هو ليزر ديود الألياف الضوئية ٨١٠ نانومتر؟

إنه الجهاز الأول والوحيد في العالم "لإزالة الشعر بالليزر بصمام ثنائي الكي" الذي يعمل بتقنية الألياف الضوئية. قضبان الدايدو الموجودة في رأس أجهزة الدايدو ليزر على المكايي ذات التقنية القديمة لا تستخدم في هذه التقنية. يتم إنتاج الطاقة عن طريق المولد الموجود داخل الجهاز. ويتم نقله إلى الرأس بدون خسارة في نظام الألياف الضوئية. توفر هذه التقنية راحة العمل عند درجات حرارة تصل إلى ٤٥ درجة. وزن اللوح الأممي أخف بأربع مرات على الأقل. يتم توفير ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل. ويتم توفير بيئة عمل أسرع وأكثر أمانًا. نظرًا لأنه يتم توصيل الطاقة بشكل أكثر توازنًا مع هذا الجهاز، فإن الألم يكون عند الحد الأدنى.

الحدود

نوع الليزر ليزر ديود كي الألياف الضوئية
الطول الموجي ٨١٠ نانومتر
طاقة مخزجات الليزر ١٢٠٠ واط
عرض النبض ٨٠٠-٥ مللي ثانية
سم ١٠٠-100 كثافة الطاقة
أوهز 1-1 تردد النار

١-٦ نوع الجلد
أوضاع التطبيق الوضع السريع، الوضع الكلاسيكي، الوضع الحر
مم ٢٣ * مم ٤ مم ٦٠ عرض البقعة
نوع التبريد رأس الياقوت مبرد بالماء والهواء
مم (محمول) ٩٤٠*٥٦٠*٥٤٠ مم (عمودي) أبعاد الجهاز ٣١*٤٢*٥٠٠
ثقل ٢٢ كجم (محمول) ٣٢ كجم (عمودي)

تكنولوجيا الغطاء الجليدي

يفضل هذه التقنية، يتم تبريد الجزء الياقوت من رأس التطبيق إلى -٥ درجة ويتم إجراء إزالة الشعر دون أي خطر للحرق.

الطول الموجي ٨١٠ نانومتر

يجب أن تكون المسألة الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها في تطبيقات إزالة الشعر هي الطول الموجي ٨١٠ نانومتر. وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالطاقة التي يمتصها الماء والهيموجلوبين عند الحد الأدنى. وهذا يضمن وصول الطاقة اللازمة إلى جذور الشعر.

هرتز ينبض في الثانية ١٠

يمكنك إعطاء إجمالي الطاقة المطلوبة عن طريق تقسيم إجمالي الطاقة التي تحتاج إلى إعطائها مرة واحدة وفي غضون ثانية إلى طاقات متساوية ١٠-٢ مرات في ثانية واحدة. هذه الطاقات المنقطعة التي تعطيها خلال ثانية واحدة تتراكم في جذر الشعر وتخلق الطاقة الإجمالية المطلوبة. بهذه الطريقة، يتم تقليل الألم. تعمل هذه التقنية على التخلص من الألم وتسمح لك بإجراء إزالة الشعر بسرعة عن طريق الكي.

التكنولوجيا التي يمكنها تغطية معظم مناطق إزالة الشعر

أهم شيء يجب مراعاته عند حساب أرقام الطاقات هذه هو أنه بفضل الطاقة الخالية من الخسارة بفترة ١٢٠٠ واط، يمكنك التطبيق من كل منطقة مرتين كحد أقصى بالنسبة لأشعة الليزر ذات الصمام الثنائي الأخرى، عليك القيام بذلك ٨ مرات؛ وفي هذه الحالة يجب أن يتم حساب ضمان هذا الجهاز بما لا يقل عن ٤ مرات مقارنة بالأجهزة الأخرى باختصار، مع هذه التقنية، يمكنك إجراء جلسة كاملة للجسم بـ ١٠,٠٠٠/١٢,٠٠٠ طلقة في ٢٠ دقيقة، بينما مع أجهزة ليزر ديود الأخرى، يتراوح هذا العدد بين ٤٠,٠٠٠/٥٠,٠٠٠ طلقة و ١ ساعة. في حين أن درجة حرارة التشغيل المحيطة هي ٢٥+ درجة - ٣٠ درجة في الأجهزة ١,٥ الأخرى، فإن هذه التقنية تسمح باستخدام ما يصل إلى ٤٥+ درجة. وزن الرأس أقل بثلاث مرات L. على الأقل (٣٠٠ جرام) من الموديلات الأخرى.

تقنية الرأس الهجين

جلسة كاملة لإزالة شعر الجسم في ٢٠ دقيقة

IPL-PRO



كريستال
ياقوتي رأس
جليدي

قوة ٣٠٠٠ واط

المصباح
الإنجليزي و رأس

IPL-OPT-FPT-SHR

بمعدات داخلية، EPIKOZ، يتمتع جهاز إزالة الشعر بالليزر (جهاز الليزر الضوئي)، الذي تنتجه شركة الميزات المتفوقة الأخرى مقارنة بالأجهزة عالية الجودة، وقوة شعاع أكثر ديناميكية، وتبريد أسرع والعديد من الأخرى. وبهذه الطريقة، تم تصميمه لإظهار الفرق بين الجودة والنتائج في أنظمة الليزر الضوئية في تركيا والعالم. فرقنا، تم تصميم تقنياتنا وصولاً إلى أصغر التفاصيل لجعلها أفضل وأكثر فائدة وأكثر فعالية وأسرع "لتحقيق النتائج. ولهذا السبب نعمل بمبدأ "التحسن دائماً".

كيفية استخدام وتطبيق جهاز ليزر الصور

أجهزة إزالة الشعر بالصور لها طول موجي يتراوح بين ٥٤٠-١٢٠٠ نانومتر. يؤثر الضوء الناتج بأطوال موجية مختلفة على بصليات الشعر. يتم امتصاص شعاع الليزر الذي يصل إلى جذر الشعر بواسطة المادة الملونة الموجودة في جذر الشعر. وتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية، وهذه الحرارة تدمر بصليات الشعر وتمنع نمو الشعر الجديد. وبالتالي يتم تدمير الشعر في مرحلة النمو. يختلف عدد الجلسات في علاج إزالة الشعر بالضوء حسب منطقة التطبيق ولون البشرة ولون بصليات الشعر وسماكها. عند إجراء الجلسات بانتظام فإن العلاج بالليزر يعطي نتائج تصل إلى ٨٥ %.

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية	نموذج
شاشة	IPL-PRO
نظام الرأس	10.4 بوصة تعمل باللمس
تبخير	الياقوت / كريستال
حجم موجة الضوء	50 جول/سم ² /إجمالي: 340 جول (كي 20 جول/سم ² إجمالي: 162 جول)
منطقة الرماية	1200-540 نانومتر - 400-1200 نانومتر
الحد الأقصى لاستخدام الطاقة	3000 واط (التيار الحالي) 7.6 ملم (سم)
الجهد الكهربائي	AC220 فولت-120 فولت
نظام التبريد	تبريد الهواء + تبريد المياه - تبريد الرأس
متوسط عمر المصباح	250,000 طلقة IPL/ 1,000,000 SHR
عدد الضربات	10-1/ثانية
نطاق إطلاق الضربات	SHR-IPL-10/6/4/2 ثنائية
الطول الموجي	530 نانومتر/590 نانومتر/640 نانومتر/690 نانومتر/950 نانومتر/1200 نانومتر
لغات البرنامج	التركية
تبريد الجلد	10/1-درجة
المصباح	المملكة المتحدة البريطانية
رأس	رأس المملكة المتحدة البريطانية



IPL-ES



كريستال
ياقوتي رأس
جليدي

قوة ٣٠٠٠ واط

المصباح
الإنجليزي و رأس

IPL-OPT-FPT-SHR

بمعدات داخلية، EPIKOZ، يتمتع جهاز إزالة الشعر بالليزر (جهاز الليزر الضوئي)، الذي تنتجه شركة الميزات المتفوقة الأخرى مقارنة بالأجهزة عالية الجودة، وقوة شعاع أكثر ديناميكية، وتبريد أسرع والعديد من الأخرى. وبهذه الطريقة، تم تصميمه لإظهار الفرق بين الجودة والنتائج في أنظمة الليزر الضوئية في تركيا والعالم. فرقنا؛ تم تصميم تقنياتنا وصولاً إلى أصغر التفاصيل لجعلها أفضل وأكثر فائدة وأكثر فعالية وأسرع "التحقيق النتائج. ولهذا السبب نعمل بمبدأ "التحسين دائماً".

كيفية استخدام وتطبيق جهاز ليزر الصور


أجهزة إزالة الشعر بالصور لها طول موجي يتراوح بين ٥٤٠-١٢٠٠ نانومتر. يؤثر الضوء الناتج بأطوال موجية مختلفة على بصليات الشعر. يتم امتصاص شعاع الليزر الذي يصل إلى جذر الشعر بواسطة المادة الملونة الموجودة في جذر الشعر. وتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية، وهذه الحرارة تدمر بصليات الشعر وتمنع نمو الشعر الجديد وبالتالي يتم تدمير الشعر في مرحلة النمو. يختلف عدد الجلسات في علاج إزالة الشعر بالضوء حسب منطقة التطبيق ولون البشرة ولون بصليات الشعر وسماكها. % عند إجراء الجلسات بانتظام فإن العلاج بالليزر يعطي نتائج تصل إلى ٨٥.

المواصفات الفنية

نموذج	IPL-PRO
شاشة	10.4 بوصة تعمل باللمس
نظام الرأس	الياقوت / كريستال
تخزين	50 جول/cmzr/الإجمالي: 340 جول (كي 20 جول/cmzr/إجمالي: 162 جول)
حجم موجة الضوء	1200-540 نانومتر - 400-1200 نانومتر
منطقة الرماية	10 x 50 x 40 ملم (7.6 سم)
الحد الأقصى لاستخدام الطاقة	3000 وابت (التيار الحالي) ■
الجهد الكهربائي	AC220 فولت-120 فولت (فولت)
نظام التبريد	تبريد الهواء + تبريد المياه - تبريد الرأس
متوسط عمر المصباح	IPL/ 250,000 طلقة 1,000,000 SHR
عدد الضربات	1-10/ثانية
نطاق إطلاق الضربات	SHR.IPL-10/6/4/2 ثنائية ■
الطول الموجي	530 نانومتر/590 نانومتر/640 نانومتر/690 نانومتر/950 نانومتر/1200 نانومتر
لغات البرنامج	التركية
تبريد الجلد	10/1-درجة
المصباح	المملكة المتحدة البريطانية
رأس	رأس المملكة المتحدة البريطانية



DIODE-PRO

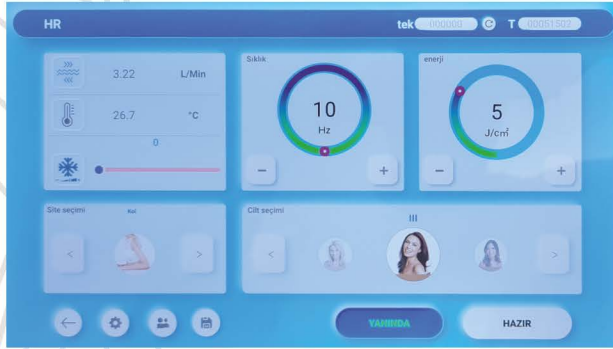

810NM Diode-pro ما هو ليزر؟

ديود برو ديود ليزر: فعال على جميع أنواع البشرة، عند السرعة القصوى، رأس معايير الذهب الكي أم في إزالة الشعر 81-808، الجليد والسماح بجلسات قصيرة وجهاز ليزر ديود للتدخين.

الحدود

أبيكوز	ماركة *
"T3iode-Pro	نموذج
50.000.000	عدد اللقطات
-5/+15	التبريد u6
مكرو	قناة النظام
ليزر ديود الكي	نوع الليزر
نانومتر 810	■ الطول الموجي
600 واط	طاقة مخرجات الليزر
1-400 مللي ثانية	عرض النبض
ل-120 2/سم	كثافة الطاقة
1-10 هرتز	تردد النار
1-7	نوع الجلد
الوضع السريع، الوضع الكلاسيكي	أوضاع التطبيق
17*10 مللي متر	عرض البقعة
رأس الباقوت تبريد المياه	نوع التبريد
45 كجم	ثقل

تكنولوجيا الرأس الجليدي

بفضل هذه التقنية، يتم تبريد الجزء الباقوت من رأس التطبيق إلى -5 درجة ويتم إجراء إزالة الشعر دون أي خطر للحرق.

الطول الموجي 810 نانومتر

يجب أن تكون المسألة الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها في تطبيقات إزالة الشعر هي الطول الموجي، وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالطاقة التي يمتصها الماء والهيموجلوبين عند الحد الأدنى 810، مما يضمن وصول الطاقة اللازمة إلى جذور الشعر.

هرتز ينبض في الثانية 10

يمكنك إعطاء إجمالي الطاقة المطلوبة عن طريق تقسيم إجمالي الطاقة التي تحتاج إلى إعطائها مرة واحدة وفي غضون ثانية إلى طاقات متساوية 10-2 مرات في ثانية واحدة. هذه الطاقات المتقطعة التي تعطيها خلال ثانية واحدة تتراكم في جذر الشعر وتخلق الطاقة الإجمالية المطلوبة. بهذه الطريقة، يتم تقليل الألم. تعمل هذه التقنية على التخلص من الألم وتسمح لك بإجراء إزالة الشعر بسرعة عن طريق الكي.

التكنولوجيا التي يمكنها تغطية معظم مناطق إزالة الشعر

(10 هرتز) على كثافة الجلد تدريجياً. وبالتالي DIODE-PRO تعمل النبضات التمسيلية منخفضة الطاقة فإنه يفتح الأبواب أمام إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة وغير ألم. يظهر أداء عالٍ في أصعب المناطق من DIODE- خلال برنامج الليزر الكي الذي يقلل من خطر الحروق حتى على البشرة الداكنة. رأس الليزر مصنوع من مادة خفيفة للغاية مع خرطوم مرن يسمح بتحريكه بسهولة على الجلد. وفي هذا الصدد، فهو PRO لا يتعب الراع حتى أثناء الاستخدام الطويل والمستمر. تعد أجهزة الليزر ذات الصمام الثنائي المزودة بتقنية هي المفضلة للمراكز التي تعمل بإيقاع عالٍ DIODE-PRO الكي.

تقنية الرأس الهجين

LCD TFT CONTROLLED TITLE"

"يتم التحكم فيها LCD TFT شاشة رأس مريح وخفيف الوزن مليون طلقة عمر 50. سهل التنظيف منطقة كبيرة للرباط وكثافة سكانية عالية

DIODE-ES



810NM Diode-es ما هو ليزر؟

ديود -ايس ديود ليزر: فعال على جميع أنواع البشرة، عند السرعة القصوى، رأس معايير الذهب الكي أم في إزالة الشعر 81-808، الجلد والسماح بجلسات قصيرة وجهاز ليزر ديود للتدخين

الحدود

ماركة
نموذج
عدد القنطلات
تبريد المياه
قناة النظام
نوع الليزر
الطول الموجي
طاقة مخرجات الليزر
عرض النبض
كثافة الطاقة
تردد النار
نوع الجلد
أوضاع التطبيق
عرض البقعة
نوع التبريد
تقل

إبيكوز
Diode-Es
20.000.000
-5/+25
مكبر
ليزر ديود الكي
نانومتر 810
500 واط
ملي ثانية 1-400
هرتز 1-120
1-10
1-V
الوضع السريع، الوضع الكلاسيكي
17*10 ملي متر
رأس البياقوت تبريد المياه
45 كجم

تكنولوجيا الرأس الجليدي

بفضل هذه التقنية، يتم تبريد الجزء البياقوت من رأس التطبيق إلى -10 درجات ويتم إجراء إزالة الشعر دون أي خطر للحروق

الطول الموجي 810 نانومتر

يجب أن تكون المسألة الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها في تطبيقات إزالة الشعر هي الطول الموجي 810 نانومتر. وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالطاقة التي تمتصها الماء والهيموجلوبين عند الحد الأدنى، مما يضمن وصول الطاقة اللازمة إلى جذور الشعر

هرتز ينبض في الثانية 10

يمكنك إعطاء إجمالي الطاقة المطلوبة عن طريق تقسيم إجمالي الطاقة التي تحتاج إلى إعطائها مرة واحدة وفي غضون ثانية إلى طاقات متساوية 10-2 مرات في ثانية واحدة هذه الطاقات المتقطعة التي تعطيها خلال ثانية واحدة تتراكم في جذر الشعر وتخلق الطاقة الإجمالية المطلوبة بهذه الطريقة، يتم تقليل الألم تعمل هذه التقنية على التخلص من الألم وتسمح لك بإجراء إزالة الشعر بسرعة عن طريق الكي

التكنولوجيا التي يمكنها تغطية معظم مناطق إزالة الشعر

(10 هرتز) على كثافة الجلد تدريجيًا. وبالتالي، فإنه يفتح DIODE-ES تعمل النبضات التسلسلية منخفضة الطاقة الأبواب أمام إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة. يُظهر أداء عاليًا في أصعب المناطق من خلال برنامج الليزر مصنوع من مادة خفيفة للغاية مع DIODE-ES الكي الذي يقلل من خطر الحروق حتى على البشرة الداكنة. رأس الليزر خراطوم مرن يسمح بتحريكه بسهولة على الجلد. وفي هذا الصدد، فهو لا يتعب الذراع حتى أثناء الاستخدام الطويل هي المفضلة للمراكز التي تعمل DIODE-ES والمستمر. تعد أجهزة الليزر ذات الصمام الثاني المزودة بتقنية الكي بإيقاع عال

تقنية الرأس الهجين

رأس مريح وخفيف الوزن
مليون طلقة عمر 20
سهولة التنظيف
منطقة واسعة للرماية وكثافة سكانية عالية
مدة الجلسة قصيرة

CARBON-ES



CARBON-ES

التقشير الكربوني
إزالة المكياج الدائم
إزالة الوشم
علاج التجاعيد، وزيادة مرونة الجلد
تضييق المسام
علاجات العيب، النمش، الوحمة، الوحمة أوتا والوحمة التولد
علاج النمش والبقع العمرية وبقع الشمس
تجديد الجلد

المواصفات الفنية	
نموذج	الكربون ES-
شاشة	8.2 بوصة تعمل باللمس
نظام العنوان	ندياج كيو سويتش
حجم موجة الضوء	1064 نانومتر - 960 نانومتر - 532 نانومتر
منطقة الرماية	1-7 ملم
الحد الأقصى لاستخدام الطاقة	1200 وابت (التيار الحالي)
الجهد الكهربى	220 فولت-120 فولت (AC)
نظام التبريد	تبريد الهواء + تبريد المياه - تبريد الرأس
متوسط عمر المصباح	1,000,000
عدد الضربات	1-10 ثانية
نطاق إطلاق الضربات	36*37*59 (LxWxH) سنتيمتر
لغات البرنامج	التركية
تبريد الجلد	1/35 درجة

الوشم الملون

التقشير الكربوني

الوشم الأسود

LIPO-ES RASPING



LIPO-ES

في مناطق Lipo-Es يوفر تخسيساً موضعياً في ٣٠ دقيقة، ويمكن استخدام التخسيس Lipo-Es البطن والساقين والذراعين والوركين والذقن. يوفر ذو الاستخدام الوظيفي يعطي Lipo-Es بتردد الموجات فوق الصوتية نتائج بمقدار ٤-٨ سم من الجلسة الأولى

تنحيف ما يصل إلى
سم في جلسة ١٢-٤
واحدة مع تطبيق

RASPING

المواصفات الفنية	
ليبو-ES	نموذج
8.2 بوصة تعمل باللمس	شاشة
بالموجات فوق الصوتية	نظام الرأس
1.7 ميغا هرتز-2.4 ميغا هرتز	حجم موجة الضوء
13,000 ساعة	وقت العملية
130 واط (التيار الحالي)	الحد الأقصى لاستخدام الطاقة
220 AC فولت-120 فولت	الجهد الكهربائي
1-20 جول	الطاقة المثلى
التركيبة	لغات البرنامج

LIPO-ES PRO SCULPTOR



RF امتصاص الهواء RF امتصاص الهواء RF امتصاص الهواء



هوت فيبرو



K كافيتاسيون ٤٠



بيبو هوت



المواصفات الفنية	
نموذج	ليبو-إس برو
شاشة	8.2 بوصة تعمل باللمس
نظام العنوان	6 بوصة متعددة الوظائف
وقت العملية	15,000 ساعة
الحد الأقصى لاستخدام الطاقة	80/130 كيلو هرتز وايت (التيار الحالي)
الجهد الكهربائي	220 AC فولت-120 فولت
لغات البرنامج	التركية

أعد تشكيل جسمك باستخدام تطبيق النحات
تخسيس من ٤ إلى ١٢ سم في جلسة واحدة

رأس بيبو *

رأس هوت فيبرو *

رأس موك *

RF في ١ امتصاص الهواء *



سطح المكتب
هيدرا فيشال
وظائف ٦



العناية
بالبشرة المهنية
٨+١ - ١٤+١ - ١٩+١



هيدرا فيشال
احترافية
٩+١



رياضة بدنية
سلبية



كرسي طبيب
تجميل
نقالة
إيتيجير



التصريف
اللمفاوي



دكتور. قلم
ديرما بين
للمكياج الدائم



جهاز
G5 المساج





QA-AC-5222/21
QA TECHNIC – UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC – ATTESTATION OF CONFORMITY

ALİKAÇ GEREKLİ YÖNETİMLİĞİ (2014/35/AB)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)

EYÜP ÖZBEK – ES MEDİKAL KOZMETİK
AKSARAY MAH. 1. Kİ. KILÇIKLI APT. NO: 11/1 ANTAKYA
HATAY/TURKEY

Ürünün Tanımı
Description of the Product/Product Part

Markası
Product Commercial Brand

Ürün Tipi
Product Type

Uygulanabilir AT Direktif(ler)i
Applicable EC Directive(s)

Uygulanabilir Harmonize Standardlar
Applicable Harmonized Standard
Ve Teknik Spesifikasyonlar
Applicable Harmonized Standard/
Applicable National Standards and
Technical Specifications

Rapor No & Rapor Tarihi
Report No. & Report Date

İşbu belge incelenmesi yapılan ürünü tasarlama işini yaptıran, Ürünün değerlendirilmesi halinde bu belge geçerliliğini kaybedecektir.
Ürünün ilgili direktif / direktifler kapsamında uygunluğu bu işin sorumluluğu Ürünün Üreticisi Aittir.
The Present certificate is valid just for the assessed product design. The certificate shall lose its validity in case of any change in the product. Ultimate responsibility related with conformity of product with directive / directives, belongs to manufacturer.

İlgili yönetmelikler ve yasal mevzuat gereği üretilen
Ultimate responsibility regarding the affixing of
belirliye malzemelerdir.
mark according to relevant regulations and legal legislation.

Sertifika Yayıy Tarihi 11.03.2021
Certificate Issue Date
Geri Alınma Tarihi 11.03.2022
Validity Date

DOĞRUSİĞİLLİ (11 ÜNİT) ENERJİ SİNERJİ AKSAMININ,
500V ATLIĞI DÖĞRÜ LÜZAR EPLASYON ÇAMASI
DOZE LIMITED (11 ÜNİT) NOT EXCEEDING THE ENERGY LIMIT,
SHOCK, SHOOT DOZE LASER HAIR REMOVAL DEVICE

E EPOKİZE

DİODE, ES, DİODK, PRO, DİODE-COLD, DİODE-AIR
ES-DİODE, PRO-DİODE, COLD-DİODE, AIR-DİODE

2104/35/AB
2014/35/EU

TS EN 60335-1

MAVDE-1995071, 08.03.2021

ALİKAÇ GEREKLİ YÖNETİMİ
AKSARAY, 01.06.02, DÜZGÖRME 1. A.Ş.
BAĞCISARAY MAH. 1. Kİ. KILÇIKLI APT. NO: 11/1
BAĞCISARAY, 11.03.2021
Tel : 0312 672 08 14
Fax : 0312 672 08 14
www.alikacgereli.com

L. Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of Executive Board





T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2021 036882 - Ticaret - Hizmet


Marka Sahibi : FİYEP ÖZBEK (T.C. Kimlik No: 19100092440)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARAAĞZI MAHAL BİRİNCİ CAD. NO: 149 BÇ KAPLI NO:2 ANKARA / BATAK
Anadolı Hançer
: 08_35
İlişiktir.


İşbu Marka 08/03 2021 tarihinde iltharen ON YIL süreyle
16/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Hakkı ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı

أنطاكيا/هاتاي ١/١ | كيليچ اوغلو ابارتماني رقم أكساراي محليسي ١٤. سوکاک
0326 232 4944 الاتصال بالمكتب
0532 130 59 45 - 0534 787 00 19 المبيعات
0532 455 34 21 خط الدعم الفني ٧/٢٤

epikoz

Es مستحضرات التجميل
الطبية تقنيات إزالة الشعر بالليزر

ES مستحضرات التجميل الطبية

أنطاكيا/هاتاي ١/١ | كيليچ اوغلو ابارتماني رقم أكساراي محللسي ١٤. سوكاك

الاتصال بالمكتب: 0326 232 4944

0532 130 59 45 - 0534 787 00 19 المبيعات

خط الدعم الفني ٧/٢٤: 0532 455 34 21