

ES MEDİKAL KOZMETİK

LAZER EPİLASYON TEKNOLOJİLERİ

epikoz

*Bizimle her zaman
daha ileriye..*

HIGH QUALITY DESIGN ELEMENTS

CE

COOL LITE PLUS



810nm Fiber Optik Diode Laser Nedir?

Fiber Optik teknolojisi ile çalışan dünyadaki İLK ve TEK "Ütöleme Diode Lazer Epilasyon" cihazıdır. Eski teknoloji Ütöleme Diode Lazer cihazlarında başlıkta bulunan Diode barlar bu teknolojiye kullanılmaz. Enerji, cihaz içerisinde bulunan Jeneratör ile üretilir ve fiber optik sistemde sıfır kayıp ile başlığa taşınır. Bu teknoloji 45° ısıya kadar çalışabilme konforu sağlar. Başlık ağırlığı en az 4 kat hafifler. Aralıksız 4 saat kullanım olanağı, daha hızlı ve güvenli çalışma ortamı sağlanır. Bu cihaz ile enerji daha eşit verildiği için acı minimumdardır.

Parametreler

Lazer Tipi	: Fiber Optik Ütöleme Diode Laser
Dalga Boyu	: 810nm
Lazer Çıkış Gücü	: 1200W
Darbe Genişliği	: 5-800ms
Enerji Yoğunluğu	: 1-100j/cm ²
Atış Sıklığı	: 1-10HZ
Cilt Tipi	: I-VI
Uygulama Modları	: Hızlı Mod, Klasik Mod, Serbest Mod
Spot Genişliği	: 12mm*23mm; 4mm; 60mm
Soğutma Şekli	: Safir Başlık Su ve Hava Soğutmalı
Cihaz Ölçüleri	: 500*420*31 Omm(Portable) 540*560*940mm (Vertical)
Ağırlık	: 22KG (Portable) 32KG (Vertical)

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safir kısmı -5 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

810nm Dalga Boyu

Epilasyon uygulamalarındaki en önemli dikkat edilmesi gereken konu 810nm dalga boyu olmasıdır. Bu sayede Su ve Hemogloblin tarafından emilen enerji, en az seviyede tutularak kıl köküne gerekli olan enerjinin ulaşması sağlanır.

Saniyede 10Hz Atış

Tek seferde bir saniye içerisinde vermeniz gereken toplam enerjiyi 1 saniye içerisinde 2-10 kez eşit enerjiler olarak bölerek toplam gereken enerjiyi verebilirsiniz. 1 saniye içerisinde verdiğiniz bu aralıklı enerjiler kıl kökünde birikerek, olması gereken toplam enerjiyi oluşturur. Bu sayede acı minimuma indirilmiş olur. Bu teknoloji hem acıyı ortadan kaldırır hem de ütöleyerek hızlı epilasyon yapmanıza olanak sağlar.

En Fazla Epilasyon Alanı Atışı Yapabilen Teknoloji


Bu atış sayılarını hesaplarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu 1200W sıfır kayıplı bir enerji sayesinde her bölgeden maksimum 2 kere geçerek uygulama yapabilirsiniz. Diğer Diode lazerlerde bunu 8 kere geçerek yapmanız gereklidir; bu durumda bu cihazın garantisi diğer cihazlarla karşılaştırıldığında en az 4 kat olarak hesaplanmalıdır. Özetle komple vücut seansını bu teknoloji ile 10.000/12.000 atış arasında 20 dakika süre içerisinde yapabilirken, diğer Diode Lazer cihazlarında bu sayı 40.000/50.000 atış ve 1-1,5 saat arasında değişmektedir. Ortam çalışma sıcaklığı diğer cihazlarda +25° - 30° derece iken, bu teknoloji ile +45° dereceye kadar kullanım sağlanmaktadır. Başlık ağırlığı diğer modellere göre en 3 kat daha azdır (300gr).

Hibrit Başlık Teknolojisi

20 Dakikada Komple Vücut Epilasyon Seansı

DIODE-ULTRA

Kameralı Sistem

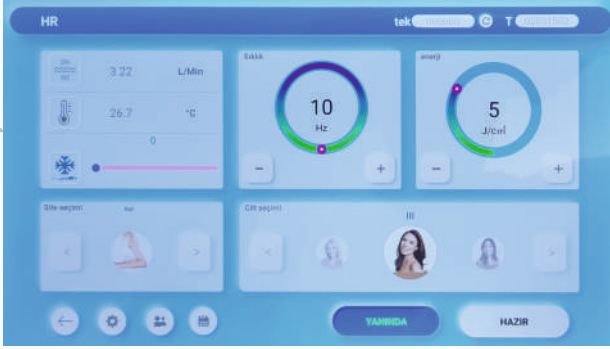

810nm Diode-Ultra Laser Nedir?

Yapay zeka destekli, kameralı sistem
Her cilt tipinde etkili, yüksek hızda, BUZ BAŞLIK
ve kısa süren seanslara imkan tanıyan,
epilasyonda ALTIN STANDART 808-810nm ütüleme
ve TÜTSÜLEME diode lazer cihazı Diode-Ultra DIODE Lazer.

Parametreler

Marka	: Epikoz
Model	: Diode-Ultra
Atış Sayısı	: 80.000.000
Su Soğutma	: -5/+15
Sistem Kanalı	: Macro
Lazer Tipi	: Ütüleme Diode Lazer
Dalga Boyu	: 810nm
Lazer Çıkış Gücü	: 1600W
Darbe Genişliği	: 1-400ms
Enerji Yoğunluğu	: 1-120J/cm ²
Atış Sıklığı	: 1-10HZ
Cilt Tipi	: 1-V
Uygulama Modları	: Hızlı Mod, Klasik Mod
Spot Genişliği	: 10*17mm
Soğutma Şekli	: Safir Başlık Su Soğutma
Ağırlık	: 65KG

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safir kısmı
-5 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

810nm Dalga Boyu

Epilasyon uygulamalarındaki en önemli dikkat edilmesi gereken konu
810nm dalga boyu olmalıdır. Bu sayede Su ve Hemoglobin tarafından emilen enerji,
en az seviyede tutularak kıl köküne gerekli olan enerjinin ulaşması sağlanır.

Saniyede 10Hz Atış

Tek seferde bir saniye içerisinde vermeniz gereken toplam enerjiyi 1 saniye içerisinde
2-10 kez eşit enerjiler olarak bölerek toplam gereken enerjiyi verebilirsiniz.
1 saniye içerisinde verdiğiniz bu aralıklı enerjiler kıl kökünde birikerek,
olması gereken toplam enerjiyi oluşturur. Bu sayede acı minimuma indirilmiş olur.
Bu teknoloji hem acıyı ortadan kaldırır hem de ütüleyerek hızlı epilasyon yapmanıza olanak sağlar.


Diode-Ultra'nın farkı

Yapay zeka destekli cilt analiz
Yapay zeka destekli kıl analizi
Yapay zeka destekli saç analizi
Yapay zeka destekli lazer epilasyon
Yapay zeka destekli kameralı sistem
3 farklı modda analiz özelliği
Kamera ile lazer epilasyon modunda full otomatik parametre ayar

Hibrit Başlık Teknolojisi

·LCD TFT KONTROLLÜ BAŞLIK
·Hafif Ergonomik Başlık
·80 MİLYON atış ömrü
·Kolay Temizlenebilir.
·Geniş Spot Atış Alanı ve Yüksek Nüfusiyet
·Kısa seans süresi

DIODE-PRO

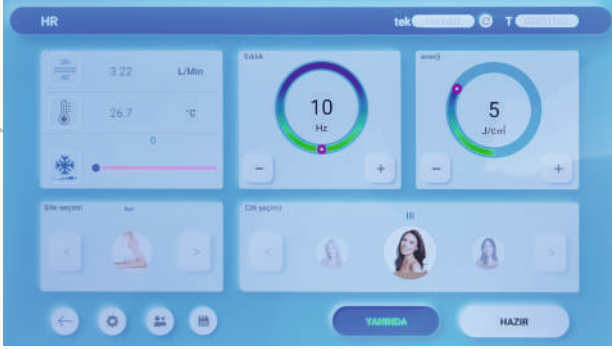

810nm Diode-Pro Laser Nedir?

Her cilt tipinde etkili; yüksek hızda, BUZ BAŞLIK ve kısa süren seanslara imkan tanıyan, epilasyonda ALTIN STANDART 808-810nm ütüleme ve TÜTSÜLEME diode lazer cihazı Diode-PRO Diode Lazer.

Parametreler

Marka	: Epikoz
Model	: Diode-Pro
Atış Sayısı	: 50.000.000
Su Soğutma	: -5/+15
Sistem Kanalı	: Macro
Lazer Tipi	: Ütüleme Diode Lazer
Dalga Boyu	: 810nm
Lazer Çıkış Gücü	: 1200W
Darbe Genişliği	: 1-400ms
Enerji Yoğunluğu	: 1-120J/cm²
Atış Sıklığı	: 1-10HZ
Cilt Tipi	: 1-V
Uygulama Modları	: Hızlı Mod, Klasik Mod
Spot Genişliği	: 10*17mm
Soğutma Şekli	: Safir Başlık Su Soğutma
Ağırlık	: 65KG

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safir kısmı -5 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

810nm Dalga Boyu

Epilasyon uygulamalarındaki en önemli dikkat edilmesi gereken konu 810nm dalga boyu olmalıdır. Bu sayede Su ve Hemoglobin tarafından emilen enerji, en az seviyede tutularak kıl köküne gerekli olan enerjinin ulaşması sağlanır.

Saniyede 10Hz Atış

Tek seferde bir saniye içerisinde vermeniz gereken toplam enerjiyi 1 saniye içerisinde 2-10 kez eşit enerjiler olarak bölerek toplam gereken enerjiyi verebilirsiniz. 1 saniye içerisinde verdiğiniz bu aralıklı enerjiler kıl kökünde birikerek, olması gereken toplam enerjiyi oluşturur. Bu sayede acı minimuma indirilmiş olur. Bu teknoloji hem acıyı ortadan kaldırır hem de ütüleyerek hızlı epilasyon yapmanıza olanak sağlar.

En Fazla Epilasyon Alanı Atışı Yapabilen Teknoloji

DIODE-PRO düşük enerjili seri atışlar (10Hz) cildi yavaş yavaş ısıtarak konforlu, acısız ve ağrısız bir epilasyon kapılarını açar. En koyu ciltlerde dahi yanık riskini en aza indiren ütüleme lazer programı ile en zor bölgelerde yüksek performans gösterir.

DIODE-PRO lazer başlığı cilt üzerinde kolay hareket ettirilmesine imkan tanıyan esnek hortumlu ve ultra hafif malzemeden üretilmiş olup uzun ve aralıksız kullanımda dahi kolu yormaz. DIODE-PRO ütüleme teknolojili diode lazer cihazları yüksek tempoda çalışan merkezlerin TERCİHDİR.

Hibrit Başlık Teknolojisi

- LCD TFT KONTROLLÜ BAŞLIK
- Hafif Ergonomik Başlık
- 50 MİLYON atış ömrü
- Kolay Temizlenebilir.
- Geniş Spot Atış Alanı ve Yüksek Nüfusiyet
- Kısa seans süresi

DIODE-ES



810nm Diode-Es Laser Nedir?

Her cilt tipinde etkili, yüksek hızda, BUZ BAŞLIK ve kısa süren seanslara imkan tanıyan, epilasyonda ALTIN STANDART 808-810nm ütüleme ve TÜTSÜLEME diode lazer cihazı Diode-ES DIODE Lazer.

Parametreler

Marka	: Epikoz
Model	: Diode-Es
Atış Sayısı	: 20.000.000
Su Soğutma	: -5/+25
Sistem Kanalı	: Macro
Lazer Tipi	: Ütüleme Diode Lazer
Dalga Boyu	: 810nm
Lazer Çıkış Gücü	: 500W
Darbe Genişliği	: 1-400ms
Enerji Yoğunluğu	: 1-120j/cm ²
Atış Sıklığı	: 1-10HZ
Cilt Tipi	: 1-V
Uygulama Modları	: Hızlı Mod, Klasik Mod
Spot Genişliği	: 10*17mm
Soğutma Şekli	: Safir Başlık Su Soğutma
Ağırlık	: 45KG

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safir kısmı -10 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

810nm Dalga Boyu

Epilasyon uygulamalarındaki en önemli dikkat edilmesi gereken konu 810nm dalga boyu olmalıdır. Bu sayede Su ve Hemoglobinin tarafından emilen enerji, en az seviyede tutularak kıl köküne gerekli olan enerjinin ulaşması sağlanır.

Saniyede 10Hz Atış

Tek seferde bir saniye içerisinde vermeniz gereken toplam enerjisi 1 saniye içerisinde 2-10 kez eşit enerjiler olarak bölerek toplam gereken enerjiyi verebilirsiniz. 1 saniye içerisinde verdiğiniz bu aralıklı enerjiler kıl kökünde birikerek, olması gereken toplam enerjiyi oluşturur. Bu sayede acı minimuma indirilmiş olur. Bu teknoloji hem acıyı ortadan kaldırır hem de ütüleyerek hızlı epilasyon yapmanıza olanak sağlar.

En Fazla Epilasyon Alanı Atışı Yapabilen Teknoloji

DIODE-ES düşük enerjili seri atışlar (10Hz) cildi yavaş yavaş ısıtarak konforlu, acısız ve ağrısız bir epilasyon kapılarını açar. En koyu ciltlerde dahi yanık riskini en aza indiren ütüleme lazer programı ile en zor bölgelerde yüksek performans gösterir.

DIODE-ES lazer başlığı cilt üzerinde kolay hareket ettirilmesine imkan tanıyan esnek hortumlu ve ultra hafif malzemeden üretilmiş olup uzun ve aralıksız kullanımda dahi kolu yormaz. DIODE-ES ütüleme teknolojili diode lazer cihazları yüksek tempoda çalışan merkezlerin TERCİHDİR.

Hibrit Başlık Teknolojisi

- Hafif Ergonomik Başlık
- 20 MİLYON atış ömrü
- Kolay Temizlenebilir.
- Geniş Spot Atış Alanı ve Yüksek Nüfusiyet
- Kısa seans süresi

IPL-ULTRA

ÇİFT
BAŞLIK

HAVA
ÜFLEMELİ
BAŞLIK

SAFİR
KRİSTAL
BUZ BAŞLIK

3000W
POWER
GÜCÜ

İNGİLİZ
LAMBA
VE BAŞLIK



IPL-OPT-FPT-SHR

EPİKOZ üretimi olan lazer epilasyon cihazımız (foto lazer cihazı) diğer cihazlara göre daha kaliteli iç donanım, daha dimamik ışın gücü, daha hızlı soğuma ve daha bir çok üstün özelliği sayesinde Türkiye’de ve Dünya’da foto lazer sistemlerinde kalitemizi ve sonuçlarımızın farkını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bizim farkımız; teknolojilerimizin daha iyi, kullanışlı, etkili ve sonuca en hızlı gidebilmek için en ince detayına kadar düşünülüp tasarlanmış olmasıdır. İşte bu yüzden “Hep daha iyiye” ilkesi ile hareket ederiz.

FOTO LAZER CİHAZININ KULLANIM VE UYGULAMA ŞEKLİ

Foto epilasyon cihazları 540-1200nm dalga boyundadır. Yayılan farklı dalga boylarında üretilen ışık kıl köklerine etki eder. Kıl köküne ulaşan lazer ışını kıl kökünde bulunan renk maddesi tarafından emilir. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve oluşan bu ısı da kıl kökünü tahrip ederek yeni kılın uzamasını engeller. Böylece büyüme fazında ki kıllar yok edilmiş olur.

Foto epilasyon tedavisinde seans sayısı, uygulama alanına, cilt rengine ve kıl kökü rengine, kalınlığına göre farklılıklar göstermektedir. Seanslar düzenli bir şekilde uygulandığında lazer tedavisi %85'e varan sonuçlar verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	IPL-ULTRA
Ekran	15 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	Safir/Kristal/Hava ; Üfleli Başlık
Tütsüleme	50 joule/cm ² (Toplam:340 joule)Ütüleme 20 joule/cm ² (Toplam:162 joule)
Işık Dalga Boyutu	540-1200 nm - 400-1200 nm
Atış Alanı	10x50x40 mm (7.6' cm)
Maksimum Güç Kullanımı	3000 watt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Soğutma Sistemi	Hava Soğutma+Su Soğutma-Başlık Soğutma
Ortalama Lamba Ömrü	250.000 Atış IPL / 1.000.000 SHR
Darbe Sayısı	1-10/sn
Darbe Atış Aralığı	SHR,IPL - 10/6/4/2 sn
Dalga Boyu	530nm/590nm/640nm/690nm-950nm-1200nm
Program Dilleri	Türkçe
Cilt Soğutma	-10/1 derece
Lamba	İngiliz UK
Başlık	İngiliz UK Header

IPL-PRO

**3000W
POWER
GÜCÜ**

**SAFİR
KRİSTAL
BUZ BAŞLIK**

**İNGİLİZ
LAMBA
VE BAŞLIK**



IPL-OPT-FPT-SHR

EPİKOZ üretimi olan lazer epilasyon cihazımız (foto lazer cihazı) diğer cihazlara göre daha kaliteli iç donanım, daha dimamik ışın gücü, daha hızlı soğuma ve daha bir çok üstün özelliği sayesinde Türkiye’de ve Dünya’da foto lazer sistemlerinde kalitemizi ve sonuçlarımızın farkını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bizim farkımız; teknolojilerimizin daha iyi, kullanışlı, etkili ve sonuca en hızlı gidebilmek için en ince detayına kadar düşünülüp tasarlanmış olmasıdır. İşte bu yüzden “Hep daha iyiye” ilkesi ile hareket ederiz.

FOTO LAZER CİHAZININ KULLANIM VE UYGULAMA ŞEKLİ

Foto epilasyon cihazları 540-1200nm dalga boyundadır. Yayılan farklı dalga boylarında üretilen ışık kıl köklerine etki eder. Kıl köküne ulaşan lazer ışını kıl kökünde bulunan renk maddesi tarafından emilir. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve oluşan bu ısı da kıl kökünü tahrip ederek yeni kılın uzamasını engeller. Böylece büyüme fazında ki kıllar yok edilmiş olur.

Foto epilasyon tedavisinde seans sayısı, uygulama alanına, cilt rengine ve kıl kökü rengine, kalınlığına göre farklılıklar göstermektedir. Seanslar düzenli bir şekilde uygulandığında lazer tedavisi %85'e varan sonuçlar verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	IPL-PRO
Ekran	10.4 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	Safir/Kristal
Tütsüleme	50 joule/cm ² (Toplam:340 joule)Ütüleme 20 joule/cm ² (Toplam:162 joule)
Işık Dalga Boyutu	540-1200 nm - 400-1200 nm
Atış Alanı	10x50x40 mm (7.6" cm)
Maksimum Güç Kullanımı	3000 watt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Soğutma Sistemi	Hava Soğutma+Su Soğutma-Başlık Soğutma
Ortalama Lamba Ömrü	250.000 Atış IPL / 1.000.000 SHR
Darbe Sayısı	1-10/sn
Darbe Atış Aralığı	SHR,IPL - 10/6/4/2 sn
Dalga Boyu	530nm/590nm/640nm/690nm-950nm-1200nm
Program Dilleri	Türkçe
Cilt Soğutma	-10/1 derece
Lamba	İngiliz UK
Başlık	İngiliz UK Header



IPL-ES

**1200W
POWER
GÜCÜ**

**SAFİR
KRİSTAL
BUZ BAŞLIK**

**İNGİLİZ
LAMBA
VE BAŞLIK**



IPL-OPT-FPT-SHR

EPİKOZ üretimi olan lazer epilasyon cihazımız (foto lazer cihazı) diğer cihazlara göre daha kaliteli iç donanım, daha dimamik ışın gücü, daha hızlı soğuma ve daha bir çok üstün özelliği sayesinde Türkiye’de ve Dünya’da foto lazer sistemlerinde kalitemizi ve sonuçlarımızın farkını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bizim farkımız; teknolojilerimizin daha iyi, kullanışlı, etkili ve sonuca en hızlı gidebilmek için en ince detayına kadar düşünülp tasarlanmış olmasıdır. İşte bu yüzden “Hep daha iyiye” ilkesi ile hareket ederiz.

FOTO LAZER CİHAZININ KULLANIM VE UYGULAMA ŞEKLİ


Foto epilasyon cihazları 540-1200nm dalga boyundadır. Yayılan farklı dalga boylarında üretilen ışık kıl köklerine etki eder. Kıl köküne ulaşan lazer ışını kıl kökünde bulunan renk maddesi tarafından emilir. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve oluşan bu ısı da kıl kökünü tahrip ederek yeni kılın uzamasını engeller. Böylece büyüme fazında ki kıllar yok edilmiş olur.

Foto epilasyon tedavisinde seans sayısı, uygulama alanına, cilt rengine ve kıl kökü rengine, kalınlığına göre farklılıklar göstermektedir. Seanslar düzenli bir şekilde uygulandığında lazer tedavisi %85'e varan sonuçlar verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	IPL-ES
Ekran	10.4 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	Safir/Kristal
Tütsüleme	50 joule/cm ² (Toplam:340 joule)Ütüleme 20 joule/cm ² (Toplam:162 joule)
Işık Dalga Boyutu	540-1200 nm - 400-1200 nm
Atış Alanı	10x50x40 mm (7.6' cm)
Maksimum Güç Kullanımı	1200 watt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Soğutma Sistemi	Hava Soğutma+Su Soğutma-Başlık Soğutma
Ortalama Lamba Ömrü	250.000 Atış IPL / 1.000.000 SHR
Darbe Sayısı	1-10/sn
Darbe Atış Aralığı	SHR,IPL - 10/6/4/2 sn
Dalga Boyu	530nm/590nm/640nm/690nm-950nm-1200nm
Program Dilleri	Türkçe
Cilt Soğutma	-10/1 derece
Lamba	İngiliz UK
Başlık	İngiliz UK Header



EMS-PRO

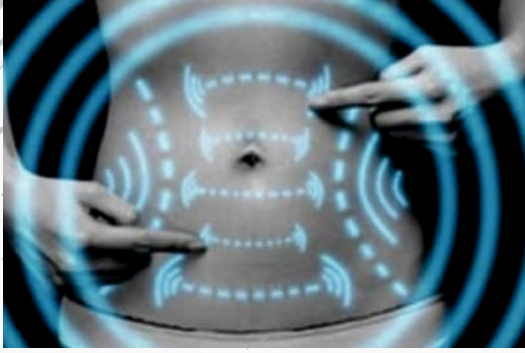

EMS-PRO Nedir?

Yenilikçi EMS (Elektro Manyetik Stimülasyon) teknolojisini kullanarak karın, kalça, bacaklar ve kol alanlarında kas kuvvetlendirmek için kullanılan bir cihazdır. Kasları yapılandırırken yağ yakar ve vücudu şekillendirir. Yenilenmiş Power ve kapasitörler sayesinde etkili sonuçlar alırsınız. Amerika menşeli Ketel Kapasitörler.

Parametreler

Marka	: Epikoz
Model	: EMS-PRO
Manyetik Alan Gücü	: Maksimum 14 Tesla
Terapi Frekansı	: 1-100 Hz (Ayarlanabilir)
Kanal Sayısı	: 2
Faz Sayısı	: 1-10 Arası
Programlar	: Estetik, kadın ve erkek sağlığı, ağrı ve fizik tedavi
Program Sayısı	: Kullanıma hazır protokol
Güç	: 5000w
Ağırlık	: 45KG

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safır kısmı -5 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

Tedavi Alanı

Vücut şekillendirme Kas kütlesini büyültme Daha kolay yağ yakımı Formda kalma imkanı Popo dikleştirme ve büyültme (Cerrahisiz BBL)Duruş bozukluklarını giderme EMS-PRO ile AĞRI YOK GELİŞME ÇOK !


EMS-PRO Çalışma Sistemi

Kasları Hem İzometrik ve İzotonik Olarak Çalıştırır... Hastaların daha şekilli vücuda sahip olmaları için sadece bölgesel inceltme ve cilt germe yeterli olmamaktadır. Yağ tabakası altındaki kasların güçlendirilmesi ve hacimsel olarak artışı sağlanırsa vücut daha şekilli ve postür daha güzel olmaktadır. EMS-PRO vücut şekillendirmede bu eksik halkayı mükemmel tamamlamakta ve çok daha ileri sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır. Bölgesel inceltme (RF, HIFU, Kriyolipoliz, Mezoterapi, IV Terapi v.s.) uygulamalarınız ile kombine edebilirsiniz ve sonuçlarınız çok daha ileri seviye olacaktır.

Kullanım Şekli ve Detayları

Minimum 4 - 8 seans uygulanmalıdır.
Seans aralıkları 2 günde 1 olarak yapılır.
Minimum haftada 2 seans uygulanmalıdır.

EMS-ES

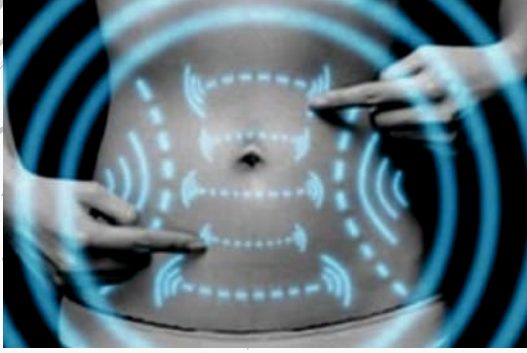

EMS-ES Nedir?

Yenilikçi EMS (Elektro Manyetik Stimülasyon) teknolojisini kullanarak karın, kalça, bacaklar ve kol alanlarında kas kuvvetlendirmek için kullanılan bir cihazdır. Kasları yapılandırırken yağ yakar ve vücudu şekillendirir. Yenilenmiş Power ve kapasitörler sayesinde etkili sonuçlar alırsınız. Amerika menşeli Ketel Kapasitörler.

Parametreler

Marka	: Epikoz
Model	: EMS-ES
Manyetik Alan Gücü	: Maksimum 14 Tesla
Terapi Frekansı	: 1-100 Hz (Ayarlanabilir)
Kanal Sayısı	: 2
Faz Sayısı	: 1-10 Arası
Programlar	: Estetik, kadın ve erkek sağlığı, ağrı ve fizik tedavi
Program Sayısı	: Kullanıma hazır protokol
Güç	: 3500w
Ağırlık	: 45KG

Buz Başlık Teknolojisi

Bu teknoloji sayesinde uygulama başlığının Safir kısmı -5 dereceye kadar soğutulurak sıfır yanma riskiyle epilasyon yapılır.

Tedavi Alanı

Vücut şekillendirme Kas kütlelerini büyültme Daha kolay yağ yakımı Formda kalma imkanı Popo dikleştirme ve büyültme (Cerrahisiz BBL) Duruş bozukluklarını giderme EMS-ES ile AĞRI YOK GELİŞME ÇOK !

EMS-ES Çalışma Sistemi

Kasları Hem İzometrik ve İzotonik Olarak Çalıştırır... Hastaların daha şekilli vücuda sahip olmaları için sadece bölgesel inceleme ve cilt germe yeterli olmamaktadır. Yağ tabakası altındaki kasların güçlendirilmesi ve hacimsel olarak artışı sağlanırsa vücut daha şekilli ve postür daha güzel olmaktadır. EMS-ES vücut şekillendirmede bu eksik halkayı mükemmel tamamlamakta ve çok daha ileri sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır. Bölgesel inceleme (RF, HIFU, Kriyolipoliz, Mezoterapi, IV Terapi v.s.) uygulamalarınız ile kombine edebilirsiniz ve sonuçlarınız çok daha ileri seviye olacaktır.

Kullanım Şekli ve Detayları

Minimum 4 - 8 seans uygulanmalıdır.
Seans aralıkları 2 günde 1 olarak yapılır.
Minimum haftada 2 seans uygulanmalıdır.

CARBON-ES



CARBON-ES

- Karbon peeling
- Kalıcı makyaj silme
- Dövme silme
- Kırışıklık tedavisi, cilt elastikiyetinin artırılması
- Gözenek daraltma
- Leke, çil, nevüs, ota nevüs, doğum lekesi tedavileri
- Lentigo, yaşlılık lekesi ve güneş lekesi tedavisi
- Cilt gençleştirme

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	CARBON-ES
Ekran	8.2 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	Nd Yag Q Switch
Işık Dalga Boyutu	1064nm - 960 nm - 532 nm
Atış Alanı	1-7mm
Maksimum Güç Kullanımı	1200 walt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Soğutma Sistemi	Hava Soğutma+Su Soğutma-Başlık Soğutma
Ortalama Lamba Ömrü	1.000.000
Darbe Sayısı	1-10/sn
Darbe Atış Aralığı	36*37 * 59 cm (L x W xH)
Program Dilleri	Türkçe
Cilt Soğutma	-1/35 derece

**RENKLİ
DÖVMELER**

**CARBON
PEELING**

**SİYAH
DÖVMELER**

LIPO-ES RASPING



LIPO-ES

30 dakikada bölgesel incelme sağlayan Lipo-Es karın, bacak, kol, basen ve gıdı bölgelerinde kullanım imkanı sağlamaktadır. Lipo-Es ultrasonik frekans ile incelme sağlar. İşlevsel bir kullanıma sahip olan Lipo-Es ilk seanstan itibaren 4-8 cm sonuç verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	LIPO-ES
Ekran	8.2 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	ULTRASONIC
Işık Dalga Boyutu	1.7 MHZ - 2.4 MHZ
Çalışma Süresi	13.000 Saat
Maksimum Güç Kullanımı	130 walt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Optimal Enerji	1-20 joule
Program Dilleri	Türkçe

**RASPING
UYGULAMASI İLE
TEK
SEANSTA
4-12 CM'E
KADAR
İNCELME**

LIPO-ES PRO HEYKELTRAŞ



VAKUM RF



VAKUM RF



VAKUM RF



HOT VIBRO



40K KAVITASYON



BIO HOT



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	LIPO-ES PRO
Ekran	8.2 inç Dokunmatik
Başlık Sistemi	6LI MULTİ FONKSİYON
Çalışma Süresi	15.000 Saat
Maksimum Güç Kullanımı	130/80khz walt (Deveraj Akım)
Voltaj	AC 220 Volt-120 Volt)
Program Dilleri	Türkçe

**HEYKELTRAŞ UYGULAMASIYLA
VÜCUDUNUZU YEDNİDEN ŞEĞİLLENDİRİN
TEK SEANSTA 4-12CM İNCELME**

- *BIO BAŞLIK
- *HOT VIBRO BAŞLIK
- *40K BAŞLIK
- *3 İN 1 VAKUM RF



**HYDRA FACIAL
6 FONKSİYONLU
M A S A Ü S T Ü**



**PROFESYONEL
CİLT BAKIM
8+1 - 14+1 - 19+1**



**PROFESYONEL
HYDRA FACIAL
9+1**



**PASİF
JİMNASTİK**



**-ESTETİSYEN
KOLTUĞU
-SEDYE
-ETEJER**



**LENF
DİRENAJ**



**DR. PEN
DERMAPEN
KALICI MAKYAJ**



**G5 MASAJ
CİHAZI**



ES MEDİKAL KOZMETİK LAZER EPİLASYON TEKNOLOJİLERİ

QA-AC-5199/21
QA TECHNİK - UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC - ATTESTATION OF CONFORMITY
ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2014/35/AB)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)
EYÜP ÖZBEK - ES MEDİKAL KOZMETİK
AKSARAY MAH. 14. SK. KILIÇOĞLU APT. NO: 11/1 ANTAKYA
HATAY/TÜRKİYE

Ürün Tanımı
Description of the Product/Product Part
Markası
Product Commercial Brand
Ürün Tipi
Product Type
Uygulanabilir AT Direktifleri
Applicable EC Directives
Uygulanabilir Harmonize Standartlar
Ve Teknik Özellikler
Applicable Harmonized Standards/
Technical Specifications
Rapor No & Rapor Tarihi
Report No & Report Date
Sertifika Yayın Tarihi
Certificate Issue Date
Revizyon Zamanı/Numar
Revison Date/Number
Geçerlilik Tarihi
Validity Date

FOTO EPİLASYON CİHAZI
PHOTO HAIR REMOVAL DEVICE
EPK02
SP, ES, PL, PRO, PL-COLD, PL-AIR, ES-PL,
PRO-PL, COLD-PL, AIR-PL
2014/35/AB
2014/35/EU
TS EN 60335-1
TS EN 60335-1
14.VD-1583/21, 08.03.2021
19.03.2021
19.03.2021 / Rev. 01
08.03.2022

L. Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of Executive Board

QA-AC-5222/21
QA TECHNİK - UYGUNLUK ONAYI
QA TECHNIC - ATTESTATION OF CONFORMITY
ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ (2014/35/AB)
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)
EYÜP ÖZBEK - ES MEDİKAL KOZMETİK
AKSARAY MAH. 14. SK. KILIÇOĞLU APT. NO: 11/1 ANTAKYA
HATAY/TÜRKİYE

Ürün Tanımı
Description of the Product/Product Part
Markası
Product Commercial Brand
Ürün Tipi
Product Type
Uygulanabilir AT Direktifleri
Applicable EC Directives
Uygulanabilir Harmonize Standartlar
Ve Teknik Özellikler
Applicable Harmonized Standards/
Technical Specifications
Rapor No & Rapor Tarihi
Report No & Report Date
Sertifika Yayın Tarihi
Certificate Issue Date
Revizyon Zamanı/Numar
Revison Date/Number
Geçerlilik Tarihi
Validity Date

DOĞU ENERJİ (İZ) GİRİŞ ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
ENERGY SYSTEMS (IZ) ENTERPRISE LASER EPILATION CHAIR
DOĞU ENERJİ (İZ) GİRİŞ ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
ENERGY SYSTEMS (IZ) ENTERPRISE LASER EPILATION CHAIR
EPK02
EPK02-ES, EPK02-PRO, EPK02-COLD, EPK02-AIR,
EPK02-PRO, EPK02-COLD, EPK02-AIR
2014/35/AB
2014/35/EU
TS EN 60335-1
TS EN 60335-1
14.VD-1583/21, 08.03.2021
19.03.2021
19.03.2021 / Rev. 01
08.03.2022

L. Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of Executive Board

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2021 036853 - Ticaret - Hizmet

epikoz

Marka Sahibi : EYÜP ÖZBEK (T.C. Kimlik No: 1108909040)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AKSARAY MAH. 14. SK. KILIÇOĞLU APT. NO: 11/1 ANTAKYA/HATAY
Antakya/Hatay
408 10
İlişktedir.

Emtiası : 408 10
İlişktedir.

İşbu Marka 07/03/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
19/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Halil ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı

TURK PATENT

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2021 036882 - Ticaret - Hizmet

ES
Medikal & Kozmetik

Marka Sahibi : EYÜP ÖZBEK (T.C. Kimlik No: 1108909040)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AKSARAY MAH. 14. SK. KILIÇOĞLU APT. NO: 11/1 ANTAKYA/HATAY
Antakya/Hatay
408 10
İlişktedir.

Emtiası : 408 10
İlişktedir.

İşbu Marka 08/03/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
16/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Halil ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı

TURK PATENT

ES MEDİKAL KOZMETİK

Aksaray Mah. 14. Sk. Kılıçoğlu Apt. No:11/1 Antakya/HATAY
Ofis İletişim: 0326 232 4944
Satış: 0532 130 59 45 - 0534 787 00 19
7/24 TEKNİK DESTEK HATTI: 0532 455 34 21



**ES MEDİKAL KOZMETİK
LAZER EPİLASYON TEKNOLOJİLERİ**

ES MEDİKAL KOZMETİK
Aksaray Mah. 14. Sk. Kılıçoğlu Apt. No:11/1 Antakya/HATAY
Ofis İletişim: 0326 232 4944
Satış: 0532 130 59 45 - 0534 787 00 19
7/24 TEKNİK DESTEK HATTI: 0532 455 34 21